

A large, stylized outline of a tooth, rendered in a dark grey color, serves as the background for the central text. The outline is thick and follows the general shape of a molar or premolar, including the crown and root.

OLIIBULK Fill


PŁYNNY KOMPOZYT DO ZĘBÓW BOCZNYCH

Po prostu proste



OliBULK Fill TO PŁYNNY MATERIAŁ KOMPOZYTOWY

do bezpośredniego wypełniania zębów stałych i mlecznych w technice Bulk Fill. Dzięki optymalnej relacji płynności do sprężystości jest wygodny podczas aplikacji i modelowania.

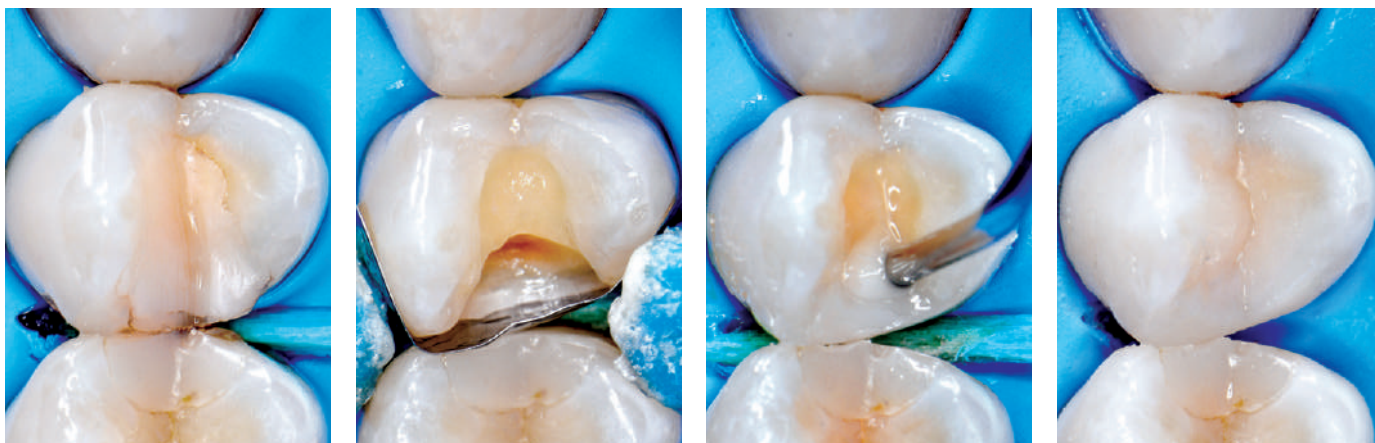

Próchnica wtórna w zębie 24. Ubytek wypełniony został OliBULK Fill, a powierzchnia odtworzona OliREVO.

dr Karol Babiński, Polska, 2019.

wybór należy od Ciebie



OliBULK Fill

technika jednowarstwowa



OliBULK Fill -

- warstwa podstawowa
np. **VIP Posterior**
- warstwa wierzchnia



standardowa technika warstwowa

OliBULK Fill przeznaczony jest do jednoetapowej odbudowy z pominięciem techniki warstwowej. Specjalna matryca monomerowa sprawia, że materiał doskonale adaptuje się do ścian ubytku, nawet gdy występują podcienie. W razie potrzeby można też zastosować go jako warstwę podstawową, a następnie guzki wymodelować standardowym kompozytem.

estetyczny efekt kameleona



- Przygotowany ubytek.



- Ostateczna odbudowa.
OliBULK Fill, odcień UD.

DOSTĘPNE ODCIENIE:

UD




MD



- UD OliBULK Fill - Universal Dentin
MD OliBULK Fill - Medium Dentin

OliBULK Fill dostępny jest jedynie w dwóch odcieniach, gdyż wyraźny efekt kameleona gwarantuje estetykę wypełnienia. Łatwość polerowania i długo utrzymujący się połysk to dodatkowe atuty kompozytu.

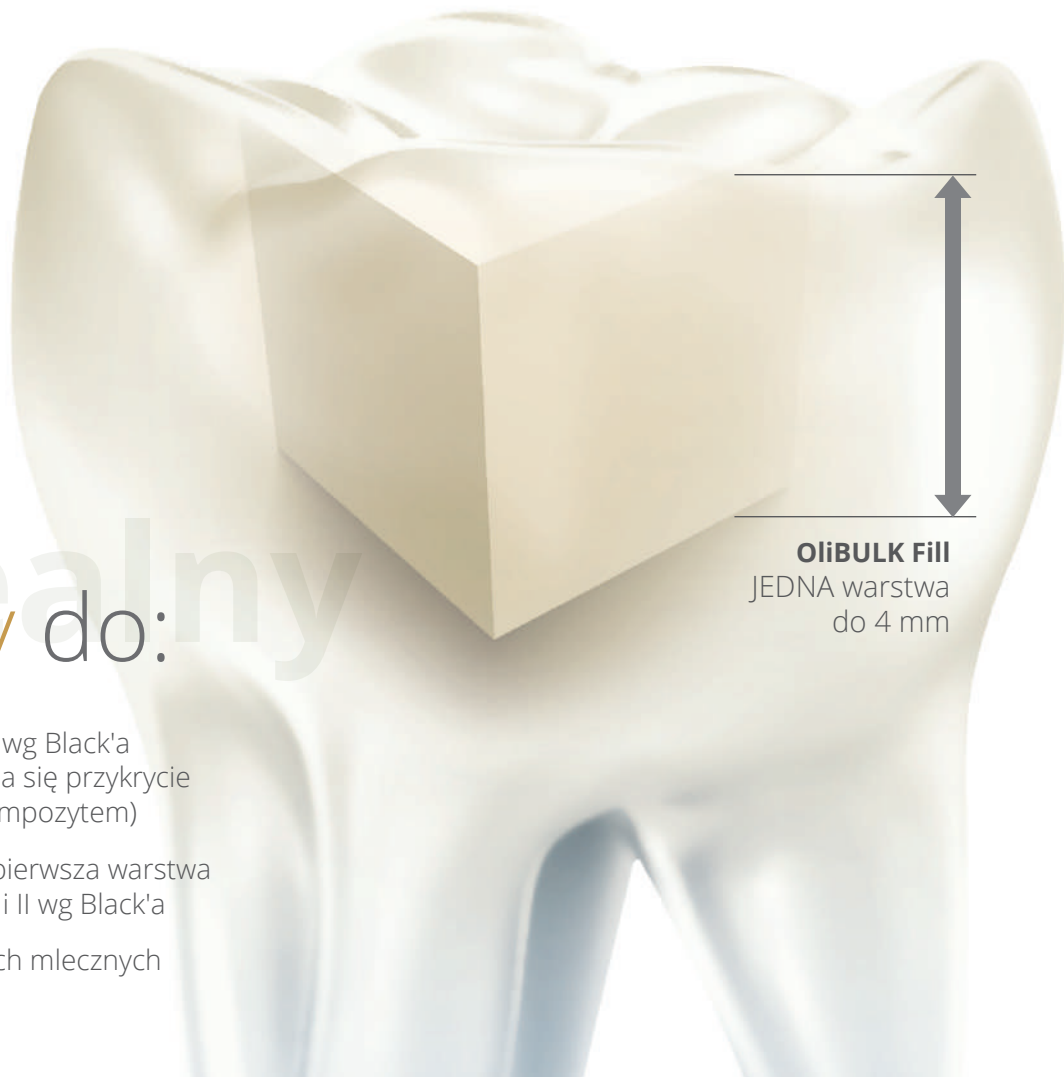

Idealny do:

- ubytków klasy I i II wg Black'a (przy klasie II zaleca się przykrycie standardowym kompozytem)
- podścieleń - jako pierwsza warstwa w ubytkach klasy I i II wg Black'a
- wypełnień w zębach mlecznych

WŁAŚCIWOŚCI

- warstwa do 4 mm
- dwa uniwersalne kolory z efektem kameleona
- optymalna relacja płynności i sprężystości
- doskonałe właściwości fizyczne i mechaniczne
- dobra widoczność w rtg (210% Al)
- nie zawiera Bis-GMA

KORZYŚCI

- wydajne użytkowanie
- estetyczne wykończenie
- doskonała adaptacja do ścian ubytku
- trwałe wypełnienia wysokiej jakości
- idealny do kontroli w rtg
- w pełni biokompatybilny




SKANUJ I OGLĄDAJ

Instrukcja video dostępna na naszym kanale YouTube.
Znajdziesz tu fakty oraz ciekawe tips&tricks.

NISKIE NAPRĘŻENIE SKURCZOWE

OliBULK Fill charakteryzuje się niską kurczliwością, co niweluje powstawanie naprężeń skurczowych. Ściany zęba są bezpieczne, a wypełnienia nie są narażone na nieszczelność brzezną.

ŚREDNI SKURCZ CAŁKOWITY (%)

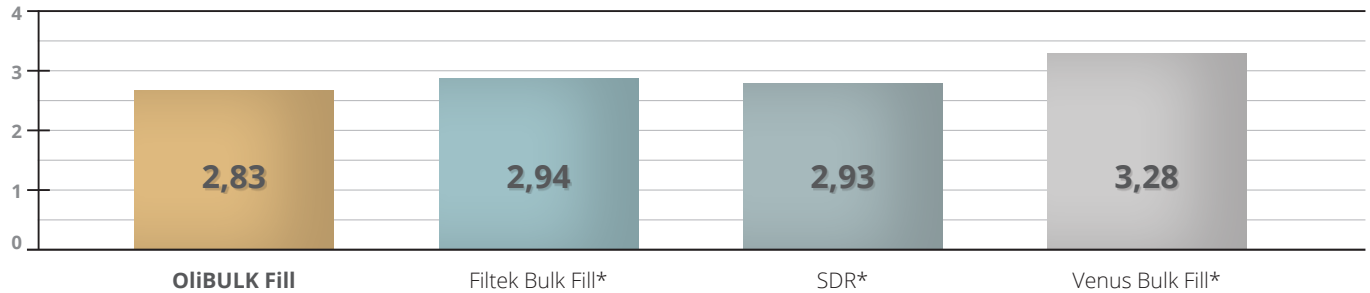


Źródło: Niezależny instytut InnoMat GmbH, Teltow, Niemcy, 2012.


WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Właściwości fizyczne i mechaniczne OliBULK Fill dają absolutną pewność, że stosowanie techniki jednowarstwowej w dużych ubytkach klasy I nie jest już żadnym kompromisem. Wypełnienia są trwałe i odporne na działanie dużych sił podczas żucia. Przy tak wygodnej i szybkiej procedurze OliBULK Fill jest materiałem idealnym do wypełnień dużych i tych o nieregularnym kształcie.


ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE (MPA)

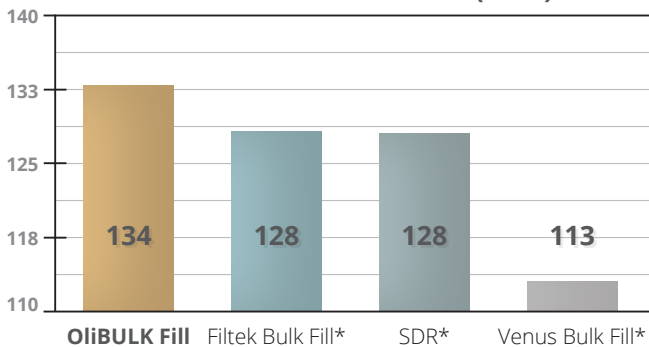


MODUŁ YOUNG'A (MPA)

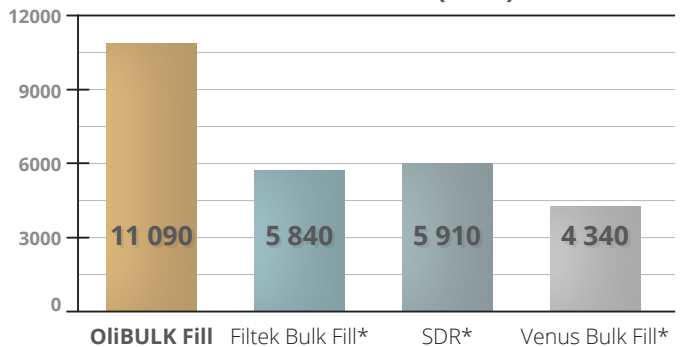

TWARDOŚĆ VICKERS'A (MPA)

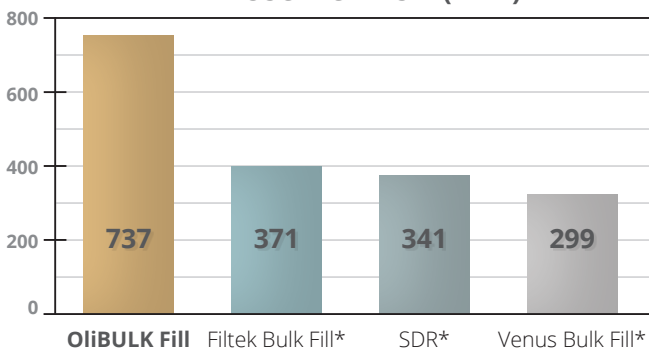

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE (MPA)

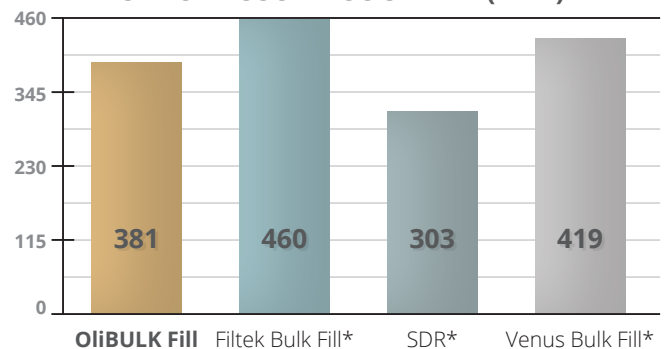


Źródło: Niezależny instytut Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme, Dresden, Niemcy, 2012.

* Wymienione marki nie są zarejestrowanymi markami Olident.

PROCEDURA

REKOMENDOWANA PROCEDURA I KOMPATYBILNE PRODUKTY

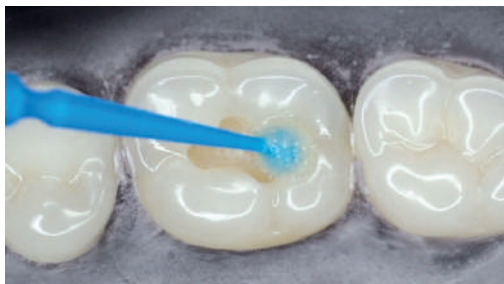


01

OliEtch BOND

- samowytrawiający
- samoadhezyjny
- mocne wiązanie

Zastosowanie systemu samoadhezyjnego znacznie skraca czas procedury.

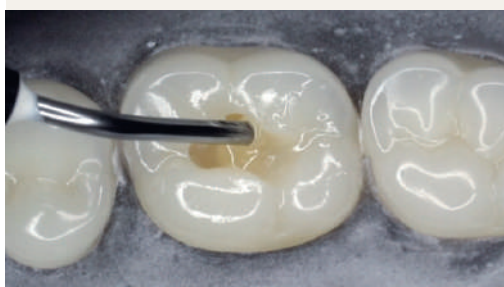

02

OliBULK Fill

- warstwa do 4 mm
- niskie naprężenia brzeżne
- odporny i trwały

Technika jednowarstwowa to oszczędność czasu i pracy. Ostateczny efekt jest pewny i wygląda naturalnie.


*Alternatywny etap procedury.
Nie zastosowany w tym przypadku.*

2.5

VIP Posterior

- więcej wypełniacza
- idealna konsystencja
- wyższa twardość

Stworzony do wypełnień w zębach bocznych narażonych na obciążenia okluzyjne. Idealny do formowania guzków.

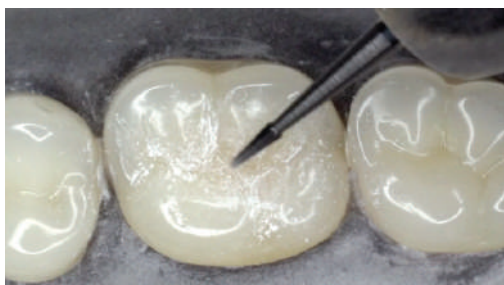

04

OliFinisher C132

- wierzchołek pozbawiony nacięć
- wyprofilowane ostrza
- wysokiej jakości uchwyt

Specjalnie wyprofilowany kąt nachylenia ostrzy sprawia, że finisz zbiera lub wygładza kompozyt, a po naturalnych tkankach jedynie się prześlizguje.



05

Uporal D 603

- nasycone pyłem diamentowym
- bezpieczne do sterylizacji
- do wielokrotnego użytku

Twarde włókna nasycone pyłem diamentowym gwarantują szybkie polerowanie i piękny połysk. Można wówczas pominąć polerowanie filcami.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA



OliEtch BOND

butelka 5 ml
OL003



OliBULK Fill

strzykawka 2 g

UD / Universal Dentin
OL095

MD / Medium Dentin
OL117

OliBULK Fill

20 kapsułek x 0,25 g

UD / Universal Dentin
OL096

MD / Medium Dentin
OL118



VIP Posterior

strzykawka 5 g

OL252 - A2
OL253 - A3
OL254 - A3.5



OliFinisher C132

2 sztuki
C132.314.008 - 8 ostrzy
C132F.314.008 - 16 ostrzy
C132UF.314.008 - 30 ostrzy



Uporal D 603

1 sztuka
kod: 603



OLIDENT[®]
INNOVATION

www.olident.com

